

Für wen ist es geeignet?

Die Pro Walk Dynamische Beinführungsorthese ist u.a. indiziert bei:

- Schlaganfall
- inkompletter Querschnittslähmung (ein oder beide Beine betroffen)
- Multipler Sklerose
- ALS
- Post-Polio Syndrom
- lumbalem Nervenwurzelschaden



PRO WALK

Rehabilitationshilfen und Sanitätsbedarf GmbH

Paul-Ehrlich-Straße 3 – 5, D-63225 Langen

Tel.: (0 61 03) 7 06 42-00, Fax: (0 61 03) 7 06 42-39

E-Mail: info@prowalk.de




Pro Walk GmbH




@pro_walk

**Ihr Pro Walk
Dynamische
Beinführungs-
orthese Part-
ner vor Ort:**



© Pro Walk PW-M-PW-Pro Walk Dynamische Beinführungsorthese-Flyer-02/23

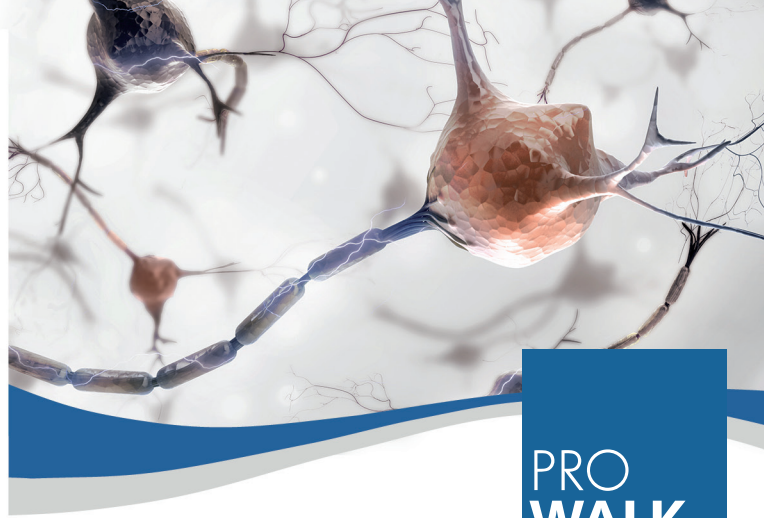

**PRO
WALK**

Pro Walk Dynamische Beinführungs- orthese

(HKAFO) Orthese

**Das innovative Orthesensystem
zur Unterstützung der Schwung-
phase beim Gehen**



www.prowalk.de

Was ist das eigentlich?

Die Pro Walk Dynamische Beinführungsorthese ermöglicht Menschen zu gehen, die ein gelähmtes Bein haben, etwa nach einem Schlaganfall. Das perfekt abgestimmte System aus Halterungen, Zügen und Gelenken hebt in der Schwungphase des Gehens den Fuß an und zieht selbstständig das Bein nach vorn.

Wo liegen die Vorteile?

- Wieder natürlich gehen: Die Orthese ermöglicht Patienten ein natürlicheres Gangbild.
- Perfekt auf Sie angepasst: Aus einem Baukasten mit Gurten und Zügen in unterschiedlichen Größen und Zugstärken wird die Orthese exakt für Sie und optimal auf Ihr Bein angepasst.
- Was bewegt wird, bleibt kräftig: Durch das natürlichere Gangbild werden genau die Muskeln unterstützt, die für das Gehen verantwortlich und notwendig sind. So beugen Sie Muskelschwund vor.

Wie funktioniert es genau?

Die Orthese wird entlang des Beines befestigt: am Becken, am Knie, an der Wade und am Fuß. Zwischen den einzelnen Gurten und Manschetten werden spezielle Züge angebracht. Wird das unbeeinträchtigte Bein nach vorn bewegt, bleibt der Fuß des gelähmten Beins an Ort und Stelle.

So spannen sich die Züge in der Orthese. In dem Moment, in dem das Gewicht auf das gesunde Bein verlagert wird, ziehen sich die Züge zusammen und führen das gelähmte Bein selbstständig mit einem natürlicheren Gangmuster nach vorn.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung!

