

# ProWalker®

Das schienengeführte Gehsystem von Pro Walk, das sich problemlos handhaben und individuell an die Bedürfnisse des Kindes anpassen lässt.



ProWalker - jetzt auch bei Facebook



HMV-Nr.: 10.46.02.3008

## ■ Der ProWalker®

Der ProWalker® ist ein schienengeführtes Gehsystem für schwerst- gehbehinderte Kinder, die ihr Körpergewicht nicht vollständig tragen und ihre Gehbewegung nur unzureichend steuern können.

Das Gerät ist für Kinder von etwa 3 bis 14 Jahren konzipiert. Das Körpergewicht kann bis zu 45 kg betragen, die Körpergröße darf 150 cm nicht überschreiten. (140 cm Körpergröße plus 10 cm Toleranz im Längenwachstum). Der ProWalker® besteht aus zwei Baugruppen: Dem Fahrgestell und einem individuell auf Maß gefertigten Schienensystem.

## ■ Das Fahrgestell

Das Fahrgestell (Chassis) bewegt sich auf speziellen Leichtlauf- rädern. Die beiden vorderen Rollen sind schwenkbar, damit der ProWalker® mit wenig Kraft und Energieaufwand in alle Richtungen bewegt werden kann. Zwischen Hinterachse und Mittelsäule ist ein Federsystem integriert. Mit diesem System läßt sich das Körper- gewicht auf die Füße stufenlos regulieren, wodurch das Gehen erleichtert wird.

Das Fahrgestell besteht aus Aluminium. Es ist daher leicht und stabil. Sollte Ihr Kind den ProWalker® nicht mehr benötigen, kann das Fahrssystem mit einem anderen Schienensystem wieder- verwendet werden (Wiedereinsatz).

## ■ Das Schienensystem

Das Schienensystem des ProWalkers® wird für jedes Kind individuell nach Maß gefertigt. Es kann und darf daher auch nur von diesem Kind genutzt werden. Es wird im Chassis verankert, nachdem es dem Kind außerhalb des ProWalkers® liegend/sitzend/stehend angezogen wurde. Der Ein- und Ausstieg in den ProWalker® ist denkbar einfach. Durch einstellbare Umlenkzüge zieht das nach vorne gehende Bein das andere automatisch nach hinten. Das normale Gehen, bei dem man einen Fuß vor den anderen setzt, wird so angebahnt, unterstützt und geführt. Zudem wird die Bein- bewegung des Kindes automatisch in die richtige Richtung gelenkt. Das System wächst mit Ihrem Kind: Es ist so konstruiert, dass ein Längenwachstum der Beine von etwa 10 Zentimetern ausgeglichen werden kann. Da es individuell gefertigt wird und individuellem Verschleiß ausgesetzt ist, wird das Schienensystem vom Hersteller nicht für den Wiedereinsatz freigegeben.

## ■ Lieferumfang des ProWalkers®

### Das Fahrgestell

- Chassis – wahlweise mit schmaler oder breiter Frontachse – abhängig von der Körpergröße
- Ausziehbarer Rahmenvorbau (Längenverstellung über Raster)
- Zwei Umlenkzüge mit Umlenkrollen an der Frontachse zur besseren Längsführung der Gehbewegung (achsiale Führung)
- Zwei Umlenkzüge mit Umlenkrollen am Heck für die Führung und Streckung der Oberschenkel (Paar)
- Federsystem, individuell stufenlos nach Körpergewicht einstellbar
- spezielle Leichtlaufräder
- Spurrarretierung für Fronträder zum besseren Geradeauslaufen
- Feststellbremsen an den Fronträdern

### Das Schienensystem:

- Beckenspanne, in der Breite verstellbar
- Spezielles Hüftgelenk mit stufenlos einstellbarer Abduktion (Spreizung)
- Hüftgelenke in der Tiefe verstellbar
- Beinschienen aus Titan, stufenlos längenverstellbar
- Wadenmanschette
- Kniegelenk mit spezieller Verriegelungsoption
- Knöchelgelenk mit stufenlos einstellbarem Anschlag
- Fuß- und Schuhaufnahme mit neuem Quick-Release-Adapter
- Kugelkopfaufnahme am Kniegelenk zur Unterstützung und Anbahnung der Schreitfunktion

### Zubehör für das Fahrssystem:

- Aufrichthilfe vorne, höhen- und winkelverstellbar
- Lenkachse
- Schiebestange
- Therapietisch
- Handfixierung

### Zubehör für das Schienensystem:

- Wadenschelle mit Führung der Kniekondylen
- Schreithilfe: Das Gehen kann von Eltern und Therapeuten mit den Schreithilfen angebahnt und geführt werden
- Kopfstützensystem/Kopfhaltensystem
- Oberschenkelmanschette



Neues Kniegelenk mit spezieller Verriegelungsmechanik des Gelenks. So wird die Gehhilfe zur Stehhilfe und zu einem vollwertigen, individuell angepassten Stehtrainer.




Spurarrretierung für Fronträder zum Geradeauslaufen mit integrierter Feststellbremse.



Hochwertige Titanschienen, stufenlose Längen Anpassung

Quick Release-Verschluß

Anschlagsbegrenzung

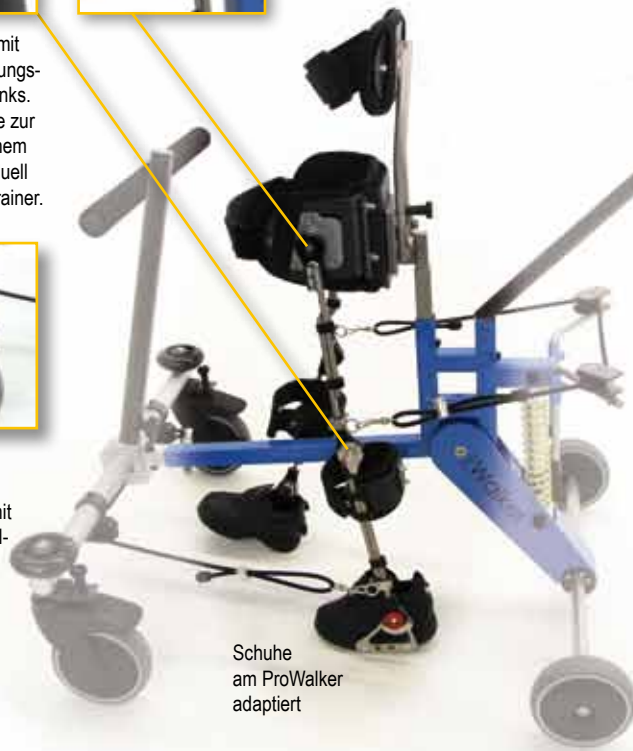

Schuhe am ProWalker adaptiert





## Liebe Kunden!

Kinder liegen uns sehr am Herzen. Gerne möchten wir auch für Ihr Kind die bestmögliche Versorgung mit dem **ProWalker®** sicherstellen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Sie erreichen uns unter der **kostenlosen Hotlinenummer:**

**0800 888 0102**

oder über **E-Mail: [info@prowalker.de](mailto:info@prowalker.de)**

## Vertrieb und Service

Der **ProWalker®** wird nur über den Sanitätsfachhandel, also durch geschulte Orthopädie- und Rehathekniker vertrieben. Diese haben eine entsprechende Schulung erfolgreich absolviert und können Kinder kompetent versorgen. Der **ProWalker®** wächst Dank zahlreicher Einstellmöglichkeiten mit. Notwendige Anpassungen und Änderungen sind mit geringem Aufwand möglich. Wir empfehlen eine Kontrolle in halbjährlichen Abständen.

Änderungen sind in Bauart und Ausführung, insbesondere wenn sie technische Verbesserungen betreffen, vorbehalten.

**Pro Walk GmbH**  
Woogstraße 48  
D-63329 Egelsbach  
Telefon: (0 61 03) 7 06 42 - 0  
Telefax: (0 61 03) 7 06 41 - 39  
[www.prowalk.de](http://www.prowalk.de)  
E-Mail: [info@prowalker.de](mailto:info@prowalker.de)

