





# Korrektes Maßnehmen und Komponentenauswahl

- Um die korrekte Passform der Orthese sicherzustellen, sind vier Maße zu erheben.
- Wenn Sie die vier Maße erhoben haben, wählen Sie das entsprechende Handmodul und den passenden Liner aus.

## 1. Für das Handmodul:

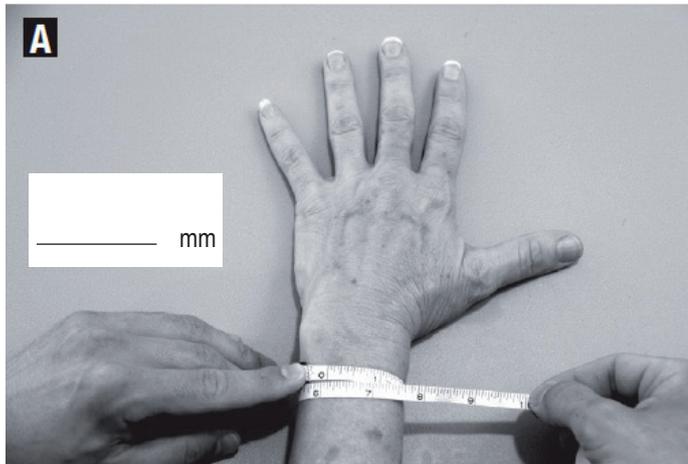


A) Umfang des Handgelenks kurz unterhalb des Ulnarknöpfchens

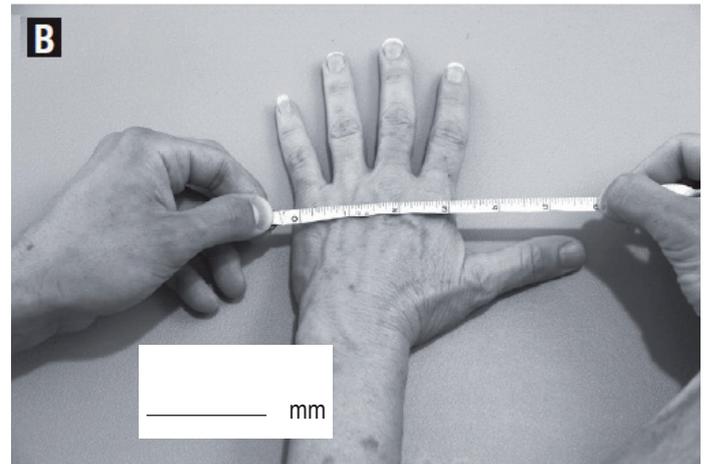


B) Lichte Weite der Hand, kurz unterhalb der Fingergrundgelenke (Zollstock oder Maßband gerade halten)

## 2. Für den Liner

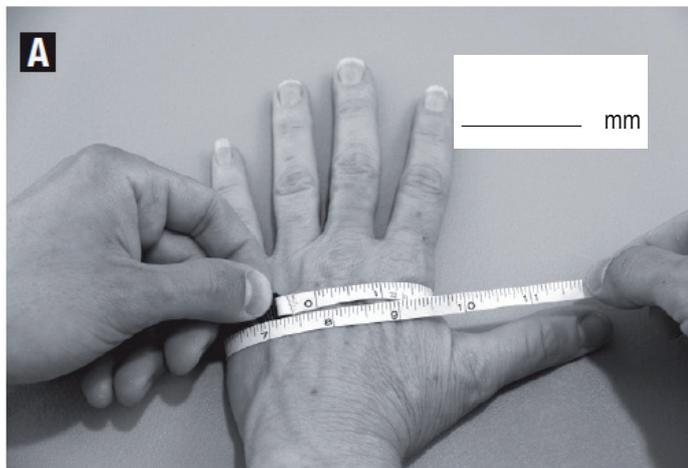

A) Umfang der Mittelhand

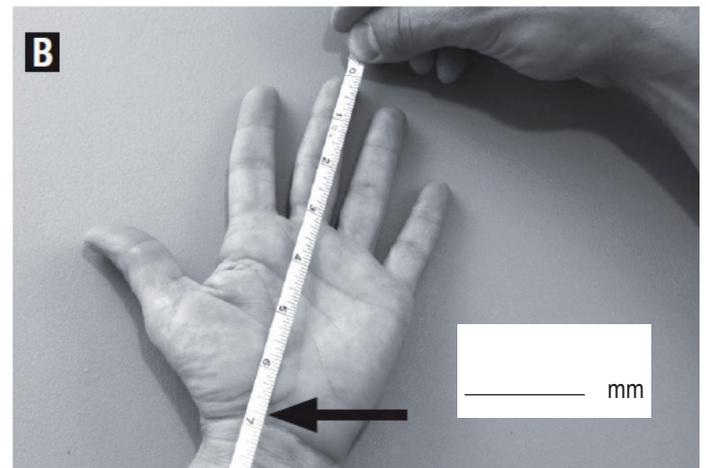

B) Handgelenksfalte – Ende der Fingerkuppe des Mittelfingers

## Hinweise und Tipps:

- 1.) Wenn Sie bei dem Handmodul z.B. zwischen „Small“ und „Medium“ wählen können und Ihr Maß für den Liner „Small“ vorschlägt, dann wählen Sie das Handmodul „Small“.

**Merke:** Bei der Auswahl des Handmoduls ist der Liner maßgebend. Liegen zwei Größenoptionen vor, wählen Sie die kleinere.

- 2.) Könnten Sie aufgrund Ihrer Liner-Maße zwischen zwei Größen wählen, dann entscheiden Sie sich für den kleineren Liner, um einen guten Sitz sicherzustellen.